

GEBRAUCHSANLEITUNG

REHASTUHL „BEN“



GEBRAUCHSANLEITUNG

REHASTUHL „BEN“

INHALTSVERZEICHNIS

Bestimmungsgemäßer Gebrauch	Seite 3
Warn- und Sicherheitshinweise	Seite 3-5
Besonderer Hinweis extratiefes Trittbrett	Seite 6
Einrichten vor der ersten Benutzung	Seite 7
Einstellungen während der Benutzung	Seite 8
Benutzung mit Rollen	Seite 9
Einstellen der Fußhalterungen	Seite 10
Abmessungen Gr. 2 – 3	Seite 11
Abmessungen Gr. 3 – 5	Seite 12
Regelmäßige Kontrolle	Seite 13
Reinigung und Pflege	Seite 13
Material	Seite 13
Hersteller und Gütesiegel	Seite 14

Wichtig:

Lesen Sie bitte vor dem Gebrauch diese Gebrauchsanleitung aufmerksam durch, um Gefahren bei der Benutzung zu vermeiden und um die Sicherheit des Kindes zu bewahren, befolgen Sie bitte genau diese Anleitung.

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

- Dieses Produkt ist ein Medizinprodukt Klasse I und ausschließlich zur Verwendung im Innenbereich und für den sachgemäßen Gebrauch als Möbelstück und Sitzgelegenheit in einem Raum bestimmt. Keinesfalls für die Verwendung an einem Fahrrad, Anhänger, in einem Auto oder ähnlichen Varianten vorgesehen.
- Die altersgemäße Größenempfehlung und die max. Belastbarkeit des Sitzes entnehmen Sie bitte der Tabelle auf der Seite 11-12.
- Bei **übermäßiger Fußaktivität** des Kindes (permanentes Trampeln, Schlagen), nehmen Sie bitte Kontakt auf, damit wir das Fußbrett entsprechend stützen bzw. verstärken, damit die Belastbarkeit erhöht wird.
- Das Untergestell und weitere Zubehörteile sind an die Form und Größe des Stuhls angepasst. Eine Verwendung für einen anderen Sitz oder Stuhl ist in keinem Fall vorgesehen und entspricht nicht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch.

WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE

- Die Gebrauchsanleitung ist ein integraler Bestandteil des Reha-Stuhls. Bitte bewahren Sie die Unterlagen auf und händigen Sie diese bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus. Im Falle des Verlustes laden Sie sich bitte eine Kopie dieser Gebrauchsanleitung von unserer Webseite: www.kreativholz.de
- Das Produkt ist kein Kletter- oder Spielgerät und ist weder als Stehfläche noch als Trittleiter geeignet; es kann kippen oder umfallen. Bitte achten Sie unbedingt darauf, dass die Benutzung des Stuhls unter Aufsicht erfolgt.
- Stellen Sie den Stuhl auf einen festen, ebenerdigen und trockenen Untergrund.
- Ein Umfallen oder Herunterfallen des Stuhls sollte unbedingt vermieden werden, da die Gesamtkonstruktion und die damit verbundene Stabilität des Stuhls beeinträchtigt werden könnte.

WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE

- Unterbinden Sie bei verschraubten Pelotten und festgestelltem Abduktionskeil, dass ein nicht altersentsprechendes Kind oder Person sich gewaltsam in den Stuhl setzt. Alle Teile können beschädigt werden (ausreißen, abbrechen) und die Sicherheit bzw. Stabilität des Produktes ist nicht mehr gewährleistet. Ebenso kann sich die Person selbst dabei verletzen. Für Fälle dieser Art, aufgrund unsachgemäßer Behandlung des Produktes, wird keine Haftung übernommen und die Gewährleistung erlischt.
- Bitte nehmen Sie alle Grundeinstellungen vor, BEVOR das Kind im Stuhl Platz genommen hat. Jegliche Einstellungen müssen sorgfältig, für das Kind bequem und dennoch auf Sicherheit bedacht, vorgenommen werden. Das Kind darf durch die Pelotten oder den Abduktionskeil keinesfalls eingeeengt werden.
- Bitte verwenden Sie nur die, von uns für dieses Produkt vorgesehenen, Gurtsysteme (Zubehör). Und bedenken Sie, dass OHNE Gurt das Kind nach vorne Kippen und Fallen kann. Es ist daher zu jeder Zeit eine Sicherung des Kindes notwendig.
- Stellen Sie sicher, dass während der Benutzung das Kind nie unbeaufsichtigt bleibt und jederzeit ein verantwortungsbewusster Erwachsener anwesend ist.
- Befestigen Sie keine Bauteile von anderen Firmen an diesem Stuhl und adaptieren Sie ausschließlich das hierfür entwickelte Zubehör.
- Schutzvorrichtungen und Etiketten dürfen nicht entfernt werden.
- Der Aktivstuhl ist CE geprüft und gekennzeichnet.
- Halten Sie dieses Produkt von offenem Feuer, Zigaretten und Wärmequellen wie Kaminfeuer, Heizkörpern und Heizgeräten fern. Bewahren Sie den Kinderstuhl bei Zimmertemperatur und in trockenen Räumen auf.

WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE

- Bitte stellen Sie vor der Benutzung des Stuhls dessen einwandfreien Zustand sicher. Sollten Sie Mängel an den Produkten während der Benutzung feststellen, nehmen Sie bitte die Person sofort aus dem Stuhl und benutzen Sie diesen nicht mehr, bis der Mängel fachgerecht behoben wurde.

Ein Abweichen von den Sicherheitshinweisen führt nicht nur dazu, dass die Garantie verfällt, sondern auch zu einer Gefährdung der Sicherheit! Der Hersteller **kreativ in holz** wird keine Haftung für Verletzungen und Schäden aufgrund derartigen Missbrauchs übernehmen. Reparaturen sollten von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Besonderer Hinweis extratiefes TRITTBRETT



reguläres Trittbrett
Grundausrüstung

extratiefes Trittbrett


Es ist schmaler gearbeitet und verläuft zwischen den beiden Kufen des Stuhls. Wenn die Beine des Kindes länger werden, ist dieses zu empfehlen. Der Stuhl sollte nicht OHNE Trittbrett genutzt werden.

Achtung:

Die Tragkraft gilt für **max. 30 kg**, wenn es in einer anderen Einstellung als ganz unten genutzt wird.

1. Die Höhe des Trittbretts sollte in der Regel so eingestellt sein, dass die Oberschenkel des Kindes im 90° Winkel zu den Unterschenkeln auf dem Trittbrett stehen. Die Anpassung erfolgt durch komplettes Abmontieren der Sternschrauben; das Einstellen der Trittbrethöhe durch Umstecken und erneutes Fixieren der Sternschrauben.


2. Achten Sie beim Stecksystem des Trittbretts unbedingt darauf, dass diese im 90° Winkel fixiert und gleich hohe Löcher verwendet werden. Ansonsten entstehen Zwischenräume und die Holzverbindungen können brechen.

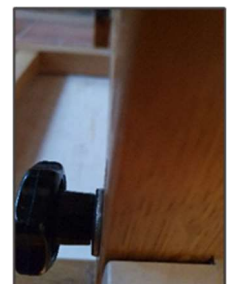

3. Die graue Beilagscheibe hat eine Federeigenschaft, sodass bei handfestem Handziehen Spannung entsteht und das Trittbrett fester bleibt. Bitte dennoch regelmäßig kontrollieren und ggf. nachziehen.

Bei Verlust der Beilagscheiben schicken wir Ihnen jederzeit Ersatz.

EINRICHTEN vor der ERSTEN BENUTZUNG

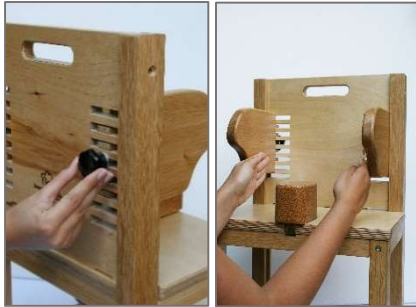

1. Lockern Sie auf der Rückseite der Rückenplatte die beiden Schrauben (gegen den Uhrzeigersinn) und schieben Sie die **Pelotten** in die weiteste Einstellung, um anschließend die passende Einstellung für Ihr Kind vorzunehmen.



2. Bringen Sie den Abduktionskeil in die vorderste Stellung, indem Sie die Schraube unter dem Sitz lockern und den Keil nach vorne ziehen.



Ohne Gurt kann
das Kind aus dem
Stuhl fallen!



3. Setzen Sie das Kind in den Stuhl und sichern Sie es durch den 4-Punkt-Brustgurt (siehe Abb.) oder durch eine 2. Person. Nun die Pelotten und den Keil in die korrekte Stellung bringen und fixieren, indem Sie die Schrauben handfest anziehen (im Uhrzeigersinn).



4. Die Höhe des Trittbretts sollte i. d. R. so eingestellt sein, dass die Oberschenkel Des Kindes im 90° Winkel zu den Unterschenkeln auf dem Trittbrett stehen. Die Anpassung erfolgt durch komplettes Abmontieren der Sternschrauben; das Einstellen der Trittbrethöhe durch Umstecken und erneutes Fixieren der Sternschrauben. Die beiden Beilagscheiben sind **HINTER** dem Stuhlbein zu positionieren.

Achten Sie beim Stecksystem der Pelotten und des Trittbretts unbedingt darauf, dass diese im 90° Winkel fixiert und gleich hohe Löcher verwendet werden. Ansonsten entstehen Zwischenräume und die Holzverbindungen können brechen.

Wichtig: Bitte befragen Sie zur korrekten Einstellung des Stuhls therapeutisches Fachpersonal, sofern sie nicht selbst vom Fach sind.

EINSTELLUNGEN während DER BENUTZUNG

- Sowohl die Pelottenbreite, als auch die Pelottenhöhe können während der Benutzung eingestellt werden. Bitte verändern Sie jedoch nur einzeln die Einstellungen und sichern Sie während dieses Vorgangs das Kind in jedem Fall mit einem Gurt oder durch eine zweiten Aufsichtsperson, welche das Kind hält.
- Bitte führen Sie eine abschließende Sicherheitsprüfung durch, ob beide Pelotten, das Trittbrett, der Abduktionskeil und ggf. der Brustgurt korrekt eingestellt und alle Schrauben **fest** angezogen wurden.
- Während des ganzen Zeitraums der Benutzung bitte das Kind im Stuhl niemals unbeaufsichtigt lassen.

Vorsorglicher Hinweis:

Bitte untersuchen Sie gerade in der ersten Zeit, ob bei Ihrem Kind Druckstellen, Rötungen oder andere Beschwerden auftreten oder das Kind über Beschwerden klagt.

Eine Umstellung des Therapiesitzes kann mit diesen Anzeichen einher gehen.

In diesem Fall: Einfach in der Übergangszeit den Rücken oder Po mehr polstern und die Nutzungszeit verkürzen.

Sollten Sie feststellen, dass das Kind Angst hat, weint, zu sehr wippt oder der Kopf zu instabil ist, sodass die Gefahr besteht, das Kind könnte Schaden nehmen oder herausfallen, nehmen Sie das Kind bitte umgehend aus dem Stuhl.

BENUTZUNG mit Rollen



1. Zum Hineinsetzen des Kindes drücken Sie die Bremshebel nach unten, bis Sie ein „klick“ hören. Danach können diese wieder gelöst werden, um den Stuhl mit dem Kind zu bewegen.



Ohne Gurt kann das Kind aus dem Stuhl fallen!

2. Schieben Sie den Stuhl aus Sicherheitsgründen unbedingt bis zur Tischkante, bis die Pelotten mit der Tischplatte abschließen. Achten Sie dabei darauf, dass die Knie des Kindes nicht an die Tisch-Unterkante stoßen.

3. Befreien Sie hin und wieder die Rollen von Schmutz und möglichen Haaren. Diese beeinträchtigen sonst die Gängigkeit der Rollen.



RICHTIG



Einstellen der FUSSHALTERUNGEN



1. Werkzeug:

Bitte legen Sie sich zurecht:

- einen Kreuzschlitz-Schrauber
- einen Schraubenschlüssel **#8**



2 . Fixieren Sie mit dem Schraubenschlüssel #8 die Mutter auf der Unterseite des Trittbretts. Und drehen Sie mit dem Kreuzschlitz-Schrauber die Schraube auf.

Wichtig bei der Anpassung mit Kind:

Die Fußhalterungen müssen in einem entspannten Zustand der Beine des Kindes angepasst werden. Die Endstellung der Fußschalen darf die Füße auf **KEINEN FALL** in einer Zwangsstellung halten, welche für das Kind auf Dauer unbequem ist und zu Fehlstellungen oder auch Druckstellen führt.

Bitte lassen Sie sich bei der Einstellung vom Fachpersonal oder einer Therapeutin helfen.

ABMESSUNGEN

	<u>Gr. 2</u>	<u>Gr. 2 (Hochstuhl)</u>	<u>Gr. 3</u>
Alter des Kindes	4 - 6 Jahre	4 - 6 Jahre	7 - 9 Jahre
Unterschenkelhöhe (Trittbrettstufen 2 cm)	17,5 - 31,5cm	15,0 - 40,0 cm	25,5 - 32,0 cm
Sitzbreite	45,0cm	45,0cm	43,5 cm
Sitztiefe ohne Keil	27,0 cm		32,0 cm
Sitztiefe mit Keil	19,0 - 26,0 cm	19,0 - 26,0 cm	22,0 - 27,0 cm
Sitzhöhe			
Höhe Rückenlehne	34,0 cm	34,0 cm	42,0 cm
Stuhlhöhe Gesamt	68,0 cm	81,5 cm	87,0 cm
Pelottenabstand (B)	14,5 - 29,5 cm	14,5 - 29,5 cm	17,5 - 30,5 cm
Pelotten-Achselhöhe max. (Oberkante)	17,0 - 26,0 cm	17,0 - 26,0 cm	19,5 - 36,0 cm
Pelottenschlitze	10 Stück	10 Stück	13 Stück
Pelotten (L/H/B)	19,5 x 14,0 x 2,5cm	19,5 x 14,0 x 2,5cm	19,5 x 14,0 x 2,5 cm
Trittbrett (L/H/B)	43 x 24,5 x 2,5 cm	43 x 24,5 x 2,5 cm	46 x 27 x 2,5 cm
Ø Rollen hinten	4,5 cm	4,5 cm	4,5 cm
Keil (L/B/H)	12,0 x 7,5 x 7,5 cm	12,0 x 7,5 x 7,5 cm	12,0 x 9,0 x 9,0 cm
Gewicht ca.	12,5 kg	13,5 kg	14,0 kg
max. Belastung ca.	40,0 kg	40,0 kg	60,0 kg
<p>Jeder Sitz ist ein Einzelstück, von uns designt und handgefertigt. Daher können Farb-, Material- und geringfügige Maßabweichungen möglich sein.</p>			

ABMESSUNGEN

	<u>Gr. 3</u>	<u>Gr. 4</u>	<u>Gr. 5</u>
Alter des Kindes	7 - 9 Jahre	ab 10 Jahre	ab 14 Jahre
Unterschenkelhöhe (Trittbrettstufen 2 cm)	25,5 - 32,0 cm	31,5 - 38,0 cm	31,5 - 38,0 cm
Sitzbreite	43,5 cm	46,5 cm	55,0 cm
Sitztiefe ohne Keil	32,0 cm		43,0 cm
Sitztiefe mit Keil	22,0 - 27,0 cm	25,0 - 31,0 cm	
Sitzhöhe	45,0 cm	45,0 / 50,0 cm	45,0 cm
Höhe Rückenlehne	42,0 cm	49,0 cm	57,0 cm
Stuhlhöhe Gesamt	87,0 cm	99,5 cm	102,0 cm
Pelottenabstand (B)	17,5 - 30,5 cm	17,5 - 30,5 cm	29,5 - 42,5 cm
Pelotten-Achselhöhe max. (Oberkante)	19,5 - 36,0 cm	19,5 - 36,0 cm	19,5 - 47,5 cm
Pelottenschlitze	13 Stück	13 Stück	19 Stück
Pelotten (L/H/B)	19,5 x 14,0 x 2,5 cm	19,5 x 14,0 x 2,5cm	19,5 x 14,0 x 2,5cm
Trittbrett (L/H/B)	46,0 x 27,0 x 2,5 cm	49,0 x 30,0 x 2,5cm	58,0 x 30,0 x 2,5cm
Ø Rollen hinten	4,5 cm	4,5 cm	4,5 cm
Keil (L/B/H)	12,0 x 9,0 x 9,0 cm	14,5 x 10,0 x 10,0 cm	14,5 x 10,0 x 10,0 cm
Gewicht ca.	14,0 kg	15,0 kg	18,5 kg
max. Belastung ca.	60,0 kg	90,0 kg	100,0 kg
<p>Jeder Stuhl ist ein Einzelstück, von uns designt und handgefertigt. Daher können Farb-, Material- und geringfügige Maßabweichungen möglich sein.</p>			

REGELMÄSSIGE KONTROLLE

- Bitte überprüfen Sie vor jedem Einsatz des Stuhls, dass alle Teile vollständig vorhanden sind, korrekt verschraubt und befestigt sind und alle Materialien sich in einem einwandfreien Zustand befinden.
- Die Schrauben (inkl. Beilagscheiben) aller Teile müssen zu jeder Zeit fest angezogen sein, da sonst die Steckverbindungen Schaden nehmen.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Die Oberfläche ist Spritzwasser geschützt. Dennoch wischen Sie bitte jegliche Feuchtigkeit oder verschüttete Flüssigkeiten umgehend mit einem trockenen Baumwolltuch ab, da ansonsten die Gefahr besteht, dass die Oberfläche aufquillt und die Benutzung und somit auch die Sicherheit eingeschränkt wird. Bei Verwendung von Antirutschmatten, diese regelmäßig und unbedingt nach dem Abwischen abnehmen, damit sie trocknen können. Bleibt die feuchte Matte auf dem Stuhl, quillt das Holz auf und die Herstellergarantie erlischt.
- Hartnäckige Verschmutzungen können Sie mit einem feuchten Baumwolltuch entfernen und dann gut nachtrocknen. Verwenden Sie keinesfalls Benzin, Lösungsmittel, Scheuer- oder Reinigungsmittel auf Chlorbasis.

MATERIAL

Stuhlrahmen und Pelotten:	Massivholz Eiche
Stuhlteile + Untergestell:	Multiplexplatte Birke
Abduktionskeil:	Kork
Oberfläche:	klar lackiert - gegen Spritzwasser geschützt

Hinweis:

Holz ist ein Naturprodukt und verändert im Verlauf der Jahre seine Farbe. Vermeiden Sie starke und dauerhafte Sonneneinstrahlung, da es zu einem fleckigen Oberflächenbild führen kann.

Für Fragen zu Sonderanfertigungen oder weiterem Zubehör sprechen Sie uns an:

HERZLICHEN DANK!

Wir danken Ihnen für den Kauf unseres Produktes.
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung.

kreativ in holz – NATÜRLICH SITZEN

Tel.: +49 (0) 81 23/99 18 785

Mail: service@kreativinholz.de

www.kreativinholz.de

